


**Тепловой массажер**



**CGN-120-3**

**Инструкция по применению**

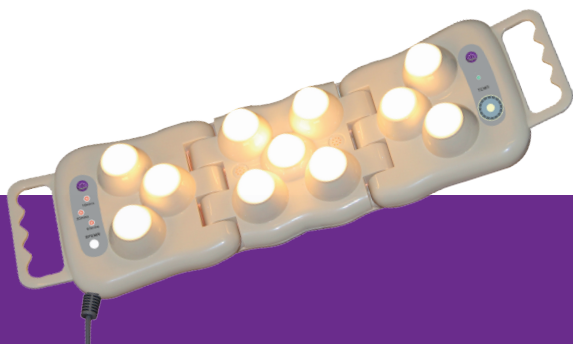



## СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Технические характеристики
- 02 Особенности
- 03 Использование
- 04 Описание изделия
- 05 Эксплуатация
- 06 Внимание
- 07 Меры Предосторожности
- 08 Ограничения
- 09 Обслуживание и хранение
- 10 Гарантия

Благодарим за использование термомассажера. Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием. Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАИМЕНОВАНИЕ: тепловой массажер
- МОДЕЛЬ: CGN-120-3
- НАПРЯЖЕНИЕ: 24 В
- МОЩНОСТЬ: 100Вт
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ: 30-60 МИН
- ВЕС НЕТТО: 1,65 КГ
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -5 +35°C
- КОЛЛИЧЕСТВО ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ АНИОНОВ:  $\geq 1000$  единиц



## ОСОБЕННОСТИ

- Эргономичный гнущийся дизайн термомассажера (до 90° левый и правый модули) позволяет менять его положение в зависимости от того, какой участок тела прогревает человек.
- 11 нефритовых сфер значительно увеличивают эффективность применения.
- Температура прожектора регулируется (40°C - 65°C), учитывая потребности и индивидуальные особенности пользователя.
- Защита изделия от перегрева.
- Портативность, простота в обращении.
- Легкий в использовании пульт управления «все в одном» с обтекаемым дизайном.
- Лампа высокого качества, используемая в качестве источника для нагрева нефритовых сфер.
- Прожектор оснащен дополнительной функцией ионизации воздуха, что делает его использование более полезным.
- Цифровой дисплей и интеллектуальный контроль температуры.
- Функция автоматического выключения по окончании заданного времени.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для прогрева ИК теплом в соответствии с принципами китайской традиционной медицины. Эргономичный гнущийся дизайн термомассажера позволяет использовать его практически на все участки тела. Изделие может использоваться для массажа и прогревания длинноволновыми инфракрасными лучами передней и задней части шеи, плеч, лица, спины, живота, поясницы, рук, ступней ног и всех суставов.


Применяется при проблемах:

Заболевания позвоночника, артриты и артрозы суставов, ишиас, хроническая усталость, воспалительные процессы, болевой синдром, кожные заболевания: заболевание акне (угревая сыпь), ожоговые раны, рубцы, псориаз, экзема и др.

- Улучшает движение жизненной энергии Ци в организме.
- Улучшает циркуляцию крови и лимфы.
- Уменьшает воспаление, облегчает боль, обладает бактерицидным действием.
- Усиливает биологические функции организма.
- Является профилактикой от закупорки сосудов.
- Улучшает подвижность суставов и устраняет их болезненность, снижает напряжение мышц.
- Укрепляет иммунитет, стимулирует выработку эндорфинов (гормонов счастья).
- Устраняет неприятные запахи.
- Осуществляет профилактику и контроль над образованием патологических процессов.



## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

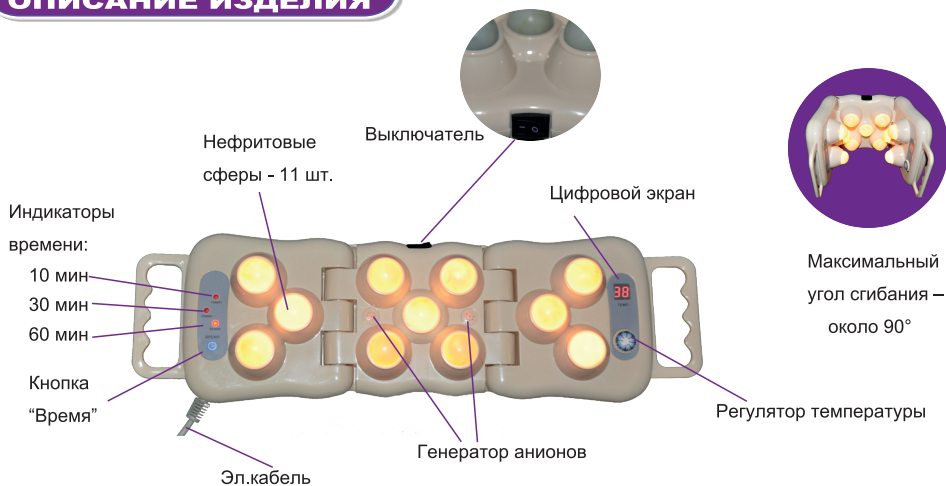

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### **Включение термомассажера**

- Подсоедините шнур питания к эл.розетке (220В/50 Гц).
- Переведите выключатель, расположенный сбоку на центральном модуле, в положение «-». На цифровом экране, выветится значение "OF". Термомассажер готов к установке желаемой температуры нагрева и режима времени (10мин/30мин/60мин) .

- Нажмите кнопку "Время" 1 раз, для включения термомассажера. Цифровой экран покажет на 5 секунд установленную температуру и затем покажет текущую температуру нефритовых сфер. По умолчанию установится 10 минут работы термомассажера с указанием соответствующего индикатора.

- Нажатием кнопки "Время" 2-й или 3-й раз можно установить 30 или 60 минут работы массажера на что укажет соответствующий индикатор.

### **Регулировка температуры**

- Установите регулятором температуры желаемую температуру нагрева нефритовых сфер (40°C-70°C).
- Вращайте регулятор температуры по или против часовой стрелки, чтобы установить наиболее низкую или высокую температуру.
- При повороте регулятора температуры, цифровой экран будет показывать задаваемую температуру и спустя 5 секунд после остановки вращения, цифровой экран автоматически отобразит текущий уровень температуры. Набрав необходимую температуру, с целью экономии тепла, устройство автоматически



уменьшит уровень напряжения и замедлит процесс нагревания. В этом случае нефритовые сферы загорятся слабым светом, обозначая то, что термомассажер находится в режиме сбережения энергии. Термомассажер будет поддерживать уровень температуры нефритовых сфер в диапазоне  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .

### **Включение анионов**

- Включение происходит при нажатии кнопки "Время".
- В хаотичном порядке замигают красные и зеленые огоньки на обеих сторонах центрального модуля термомассажера, обозначая, что анионы испускаются из двух отверстий.

### **Использование**

- Пользователь может сгибать массажер с обеих сторон в направлении к центру под различными углами (включая одностороннее и двустороннее сгибание, максимальный угол сгибания – около  $90^{\circ}$ ) в соответствии с рельефом отдельно взятой части тела.

- С помощью термомассажера можно проводить термотерапию плечевого пояса, тыльной части шеи, области живота, поясничного отдела, стоп, голени, колен, бедер, локтей, рук, спины, что в равной степени обеспечивает физиотерапию и заботу о здоровье.

- Так же лежа на ровной и жесткой поверхности, можно делать прижигание, прогревание ИК теплом и надавливание (акупунктуру) на биологически важные точки на спине.

- Всегда устанавливайте комфортную температуру.

### **Выключение**

- Переведите выключатель в положение «О», после чего цифровой экран и индикатор времени погаснут и термомассажер выключится.

- Отсоедините шнур питания от эл.розетки.

### **Автоматическое выключение термомассажера**

- После того, как установлен какой-либо уровень температуры и термомассажер не будет выключен в течение 2 часов, то автоматически нагревание прекратится.

- Для повторного использования массажера необходимо восстановить тепловой режим, повернув ручку температуры, либо перезапустить кнопку питания.





## ВНИМАНИЕ

*Это изделие не предназначено для использования взрослыми людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями. Изделие может использоваться только под наблюдением взрослых.*

*Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении ниже перечисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая. Выключите питание, извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.*

- 1. Если изделие упало и было повреждено или внутрь изделия попала вода.*
- 2. Если поврежден сетевой шнур или эл.вилка.*
- 3. Если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.*

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте тепловой массажер по назначению.
2. После включения и перед использованием, проверьте рукой температуру нефритовых сфер, установите комфортную температуру, чтобы не получить ожог.
3. В случае непосредственного контакта с кожей, необходимо предварительно провести дезинфекцию изделия.
6. Используйте изделие через хлопчатобумажную салфетку.
4. Будьте осторожны с изделием во время его использования, не допускайте ударов, падений или перегиба электрического провода, это продлит срок службы изделия.
5. Подключайте термомассажер к электрической розетке только надлежащего эл.питания (220В).
6. Допустимая влажность окружающей среды:  $\leq 80\%$ .
7. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.
8. Держите массажер вдали от детей.
9. Продолжительность применения на каждый участок тела должна составлять не менее 10 минут.
10. Лицам с повышенной чувствительностью к теплу или тонкой чувствительной кожей, а также лицам с сахарным диабетом следует соблюдать осторожность при пользовании термомассажера. Устанавливайте температуру чуть ниже обычной во избежание ожогов.
11. Наилучший эффект достигается при длительном использовании (не менее 3 недель) в случае 2-х процедур в день.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

В следующих состояниях необходимо проконсультироваться со специалистом:

- онкология;
- гипертонический криз;
- гипертермия
- высокая температура;
- туберкулез активной формы;
- алкогольное опьянение.



## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке термомассажера или силового кабеля.
2. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой изделия.
3. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки термомассажера.
4. Храните термомассажер в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
5. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
6. Не подключайте или отключайте изделие от розетки мокрыми руками, может привести к удару электрическим током или выходу массажера из строя.

## ГАРАНТИЯ

Компания предоставляет гарантию на продукцию в соответствии с законом по защите прав потребителя.

Если возникли какие-либо проблемы с продукцией, позвоните в демонстрационный центр, в котором вы приобрели данное оборудование или в ближайший центр

Наименование		ДИЛЕР (СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР)
Серийный номер модели		
Покупатель		
Адрес Телефон		
Дата покупки		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД _____ с момента покупки

Гарантийный ремонт продукции осуществляется в течение **1 года**. Продолжительность гарантии может быть ограничена, если оборудование использовалось в коммерческих целях.

### Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Производитель: ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS I/E CO., LTD., ZMC BUILDING, 101-2, N.ZHONGSHAN ROAD, HANGZHOU, 310003, CHINA

По заказу: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, [www.llotus.ru](http://www.llotus.ru)